

NuCLEUS-XTM

Balloon Aortic Valvuloplasty Catheter



ニュークリアス・エックスの特徴

＜ウエスト形状デザイン＞

・バルーン中央部が少し遅れて拡張する事により、安定したポジショニングが可能

＜X シャフトの採用＞

・インナーシャフトの強化により、保持力、プッシュビリティが向上




NuCLEUS-XTM

コンセプトは Balloon ポジショニングの最適化

①シャフト

Xシャフトの採用（インナーシャフトの強化）
保持力、プッシュビリティの向上

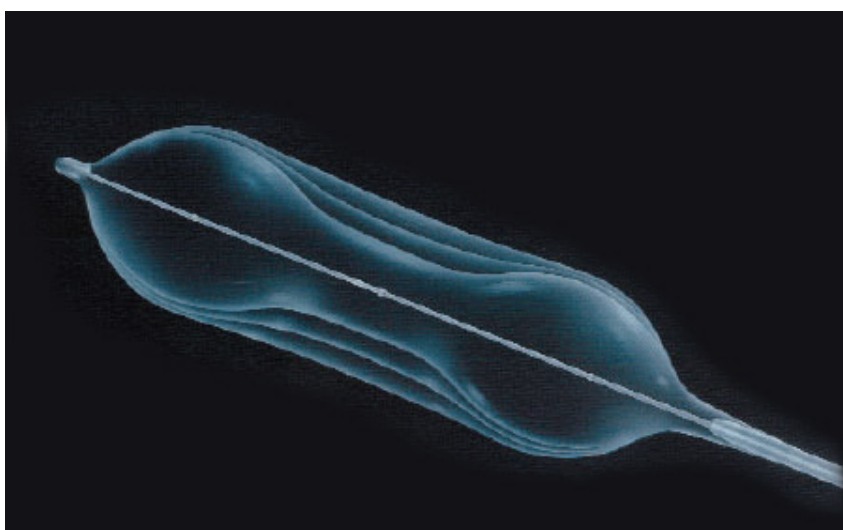


②バルーン

拡張時のウェスト形状デザイン (90~100%)
Balloon 拡張時センタリングポジション向上

③マーカー

スリーマーカーの採用
Balloon センタリングの確認向上

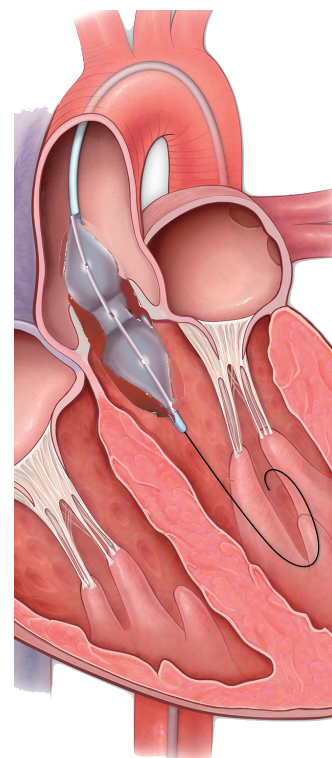

医療機器承認番号: 20600BZY00326000
販売名: 弁拡張カテーテル NuCLEUS-X

カタログ番号	JAN コード	バルーン直径 (mm)	バルーン長さ (mm)	適合シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (inch)	最大使用圧力 (ATM)
PVN400	4562100653570	18	40	10	9	110	0.035	4
PVN403	4562100653587	20	40	12	9	110	0.035	4
PVN406	4562100653594	22	40	12	9	110	0.035	3

特注品: PVN409/412/415 は特注品で取扱いできます。

保険医療材料請求分類: 弁拡張用カテーテル

販売業者 株式会社ジェイ・エム・エス

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井 1-13-5 新南大井ビル
TEL: 03-6404-0603 FAX: 03-6404-0613 <https://www.jms.cc>
広島本社 〒730-8652 広島市中区加古町 12 番 17 号
TEL: 082-243-5844 FAX: 082-243-5997



製造販売業者 株式会社トライテック

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井 1-20-17 マニフィック南大井ビル
TEL: 03-5767-9831 FAX: 03-5767-9839 <https://www.trytech.co.jp>
関西支店
TEL: 075-275-2787 FAX: 075-277-4912
製造業者: NuMED Canada Inc. (カナダ)



(株)トライテックは ISO13485 の認証を取得し、
このシステムに基づき製品管理への取り組みを
着実に進めております。 TRT-NUM-CLX-2103-0004